

ReSound Unite™ TV/Audio Streamer 2



Produktbeskrivning

ReSound Unite™ TV/Audio Streamer 2 förvandlar hörapparaterna till en uppsättning smarta och diskreta trådlösa hörlurar. Den sänder stereoljud direkt från TV och andra ljudenheter till hörapparaterna. Brukaren behöver inte bära någonting extra runt halsen och det finns inte något behov av sladdar eller kablar.

Med TV/Audio Streamer behöver brukaren inte längre välja mellan att titta på TV eller att delta i ett samtal. De kommer att höra ett ljud som är balanserat mellan TV:n och omgivningen. På så sätt kan de titta på TV, prata med vänner och familj och samtidigt hålla reda på vad som händer runt omkring.

TV/Audio Streamer 2 kan även anslutas till andra ljudkällor. Brukarna kan även ansluta den till datorn, ljudanläggningen och andra enheter. Den 2,4 GHz trådlösa tekniken öppnar dörren till unika möjligheter, exempelvis kan upp till tre streamers anslutas till olika ljudkällor och flera olika brukare kan ansluta till samma ljudkälla. Exempelvis kan en grupp brukare av trådlösa ReSound-hörapparater titta på TV tillsammans genom att använda samma TV/Audio Streamer 2. Varje brukare får starkt och tydligt ljud direkt in i sina hörapparater.

Enkel att ansluta

- Fungerar med praktiskt taget alla analoga och digitala ljudenheter.
- Parkoppla: Tryck på parkopplingsknappen på TV/Audio Streamer 2 och öppna och stäng hörapparaternas batteriluckor inom 20 sekunder.
- Parkoppling kan även göras via programvaran ReSound® Aventa 3
- Justerbar ljudfördröjning för att motverka ekoeffekter och problem med ljud/bildsynkronisering på avancerade ljudanläggningar, t.ex. surroundsystem och digitalboxar.

Enkel att använda




- Aktiveras med ett knapptryck, antingen på hörapparaten eller på ReSound Unite™ Fjärrkontroll (tillbehör)
- Överför kristallklart ljud upp till sju meter bort - brukaren kan gå omkring och titta på TV
- Återansluter automatiskt om brukaren lämnar rummet och återvänder inom 5 minuter
- Installera och det är klart – tryck bara på en knapp för att höra TV:n

2,4 GHz trådlös teknik

- Smart, stabil och pålitlig standard med kraftfull, klar och stabil signal
- Med en omärkbar fördröjning på 20 ms (millisekunder) uppstår inga synkroniseringsproblem mellan ljud och bild.

Beskrivning

1. Mikro-USB-strömkontakt
2. Parkopplingsknapp
3. Mono-/stereoomkopplare
4. Analog ljudingång, minijack
5. Optisk ljudingång (Toslink)
6. Koaxial ljudingång
7. Öka volymen
8. Minska volymen
9. Strömindikator (grön)
10. Aktivitetsindikator (gul)
11. Väggkontakt
12. Mini-USB-kontakt

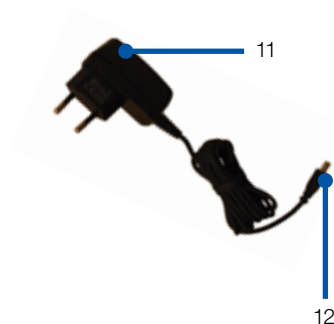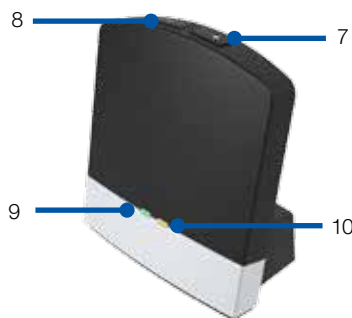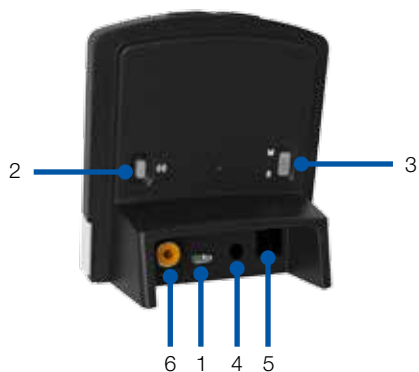

Teknisk information

Mått	91 x 83 x 47 mm
Vikt	93 g
Strömförsörjning	Extern nätagadapter, 5 V DC
Anslutning	Mikro-USB
Effektförbrukning	Max. 150 mA
Ljudgränssnitt	Analog: Stereo minijack --> L/R RCA/minijack/Scart Digital: Optisk (Toslink) Koaxial
Digitala ljudformat som stöds	Stereo PCM - Samplingsfrekvens: Upp till 192 kHz - Samplingsupplösning: Upp till 32 bit Dolby Digital* - Kanaler: Max 5.1 - Bitrate: 32 kbs till 640 kbs - Samplingsfrekvens: 32, 44,1 och 48 kHz
Känslighet line-ingång	750 mV RMS
Trådlösa anslutningar	Flera hörapparater per TV/Audio Streamer 2 Upp till tre enheter kan anslutas till ett set hörapparater
Räckvidd	7 meter
Streaminglatens	20 ms
Ljudkvalitet	Mono/Stereo 20 kHz exempelfrekvens
Ljudbandbredd	10 kHz
Trådlös frekvens	2,4 GHz
Emission	Max. 10 dBm I överensstämmelse med alla relevanta standarder
ESD-tolerans	±4 kV kontakt ±8 kV luft
Drifttemperatur	0 till 55 °C
Förvaringstemperatur	-20 till +60 °C

*Dolby Digital Plus (kräver HDMI-gränssnitt), Dolby TrueHD, Dolby Pro Logic, Dolby Digital EX, Dolby Digital Surround EX och AAC (Advanced Audio Codec) stöds ej.

ReSound

rediscover hearing